

Überleitsysteme für Spüllösungen

Ecobag® und marktübliche Beutelsysteme

Länge 210 cm	patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikon Schlauch	
mit Click Connector	Ecodick® Nr. 1	einflüßig
	Ecodick® Nr. 2	zweiflüßig, mit Rasterklappen
mit Spike Connector	Ecodick® Nr. 4	einflüßig, mit Rücklaufsperr
	Ecospile® Nr. 1	einflüßig
	Ecospile® Nr. 2	zweiflüßig, mit Rasterklappen
	Ecospile® Nr. 4	einflüßig, mit Rücklaufsperr

Länge 330 cm (Arthros)	patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikon Schlauch	
mit Click Connector	Ecodick®-Arthros Nr. 1	
mit Spike Connector	Ecodick®-Arthros Nr. 1	

Länge 330 cm (Arthros)	patientenseitiger Luer-Lock-Anschluss	
mit Click Connector	Ecodick®-Arthros Nr. 2	
mit Spike Connector	Ecodick®-Arthros Nr. 2	

Ecobag® click ist universell einsetzbar

Ein Beutel, zwei Alternativen – durch das Doppelportsystem ist Ecobag® click auch mit allen herkömmlichen Dornarschließern und Überleitsystemen kompatibel.

Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Das Spüllösungsprogramm in Ecobag® click, Ecovlav® und Ecotainer®


Ecobag®	NuCl 0,9%	Singer-Lactar	Acqua				
Ecobag® click	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	
	800 x 300 ml	3570310	4454803	3524430	0062667		
	20 x 100 ml	3570350	4454815	3524450	0062663	337872	0220208
	20 x 250 ml	3570380	4460336			337873	0202654
	10 x 500 ml	3570430	4499314	3570510	0062686	337874	0220202
	10 x 1.200 ml	3570440	4499357			337875	0202657
Ecotainer®	NuCl 0,9%	Ringer	Acqua				
Ecotainer®	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	
	10 x 500 ml	3570430	6962038	3570610	0062628	0062423E	0105886
6 x 1.200 ml	3570610	6962042	3570630	0062634	0062433E	0095952	
Ecotainer® plus	NuCl 0,9%	Ringer	Acqua				
Ecotainer® plus	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	
	6 x 1.200 ml	3570210	7503097			0062543E	7503080
Ecobag® click	NuCl 0,9%	Ringer	Glucose 5,0%				
Ecobag® click	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	
	4 x 1.200 ml	FRE11930	9473463	FRE11944	9488884	FRE11914	0493336
2 x 3.200 ml	FRE13370	9473905	FRE13384	0488892	FRE13314	0493342	
Ecobag® click	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	
	4 x 1.200 ml				Serotec-Mannitol 2%		
2 x 3.200 ml					FRE13328	0490419	
					FRE13328	0490425	
Ecobag® click	Überleitsysteme mit Click Anschluss			Überleitsysteme mit Spike Anschluss			
	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN	
Typ (z. B. S16-4)			Typ (z. B. S16-4)				
Ecobag® Nr. 1	2192909	0490602	Ecobag® Nr. 1	2192288	0490602		
Ecobag® Nr. 2	2192271	0490649	Ecobag® Nr. 2	2192271	0490626		
Ecobag® Nr. 4	2192272	1795734	Ecobag® Nr. 4	3105603	0912374		
Ecobag® Arthros Nr. 1	2192272	0490677	Ecobag® Arthros Nr. 1	3104903	2479693		
Ecobag® Arthros Nr. 2	2192270	0490689	Ecobag® Arthros Nr. 2	2192278	0490555		

B. Braun Melsungen AG | DPM | Carl-Braun-Str. 1 | 34212 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 611) 71-33 99 | Fax (0 56 611) 71-35 50 | www.braun.de

HEU042401-10-000001-0001-100001

Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Das Spüllösungsprogramm in Ecobag® click, Ecovlav® und Ecotainer®

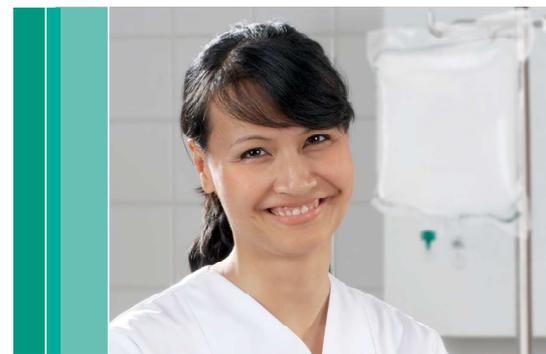

B. BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ecobag® click

Immer die beste Verbindung ... passt sich jeder Bewegung an



Per System 4. mit Adapter an die Wunde angeschlossen.
Ecobag®-Konnektor bis zur Bestätigung des Port-Clicker®.
Zum Bestätigen des Port-Clicker® und Ecobag® herausziehen.

Spüllösungsbeutel mit innovativem Verschlusssystem: Leichtes Konnektieren und 360° Beweglichkeit

Nur ein kurzes Klicken und der Ecobag® click ist angeschlossen, fest und korrelations-sicher. Der flexible, drehbare Kopf der Ecobag®-Überleitgeräte passt sich jeder Bewegung an und erleichtert so die Handhabung. Ein Verhaken oder Verkleben des Schlauches wird vermieden. Und mit einem leichten Druck auf die Seitenflgel wird der Venenbus wieder zerlegt. Der Port verschließt sich sofort vollständig.



- Komfortables Handling durch 360° flexiblen Drehkopf
- Leichte und sichere Arretierung des Überleitgerätes im Portsystem
- Wiederabdichtende Ports

Ecobag®

Mit sanftem Druck präzise spülen ... und dabei Zeit und Kosten sparen



Druckausübung: Ein geringer Druck auf die weiche Spitze bewirkt einen feinen, präzisen Strahl der Spüllösung.
Punktförmige Anwendung: Der 10ml-Minidose-Behälter erlaubt eine auf den Punkt genaue Anwendung der Spüllösung.
Ecobag® Ecobag® (500 ml) Spezial für die Ohren mit spezieller Anwendung.

Flexibler Spülbehälter für punktgenaue, effiziente Anwendungen

Das weiche Material des Ecobag®-Behälters (Polyethylen) und der Spülhohler ermöglichen eine punktgenaue Spülung durch sanften Druck der Plastikspitze.

Aufgrund der verschiedenen Behältergrößen kann Ecobag® an jede Applikation angepasst werden. Durch die abnehmbare Verschlusskappe wird sofort mit der Anwendung begonnen – ohne Spritze, ohne Nierenschale.



Ecotainer® und Ecotainer® plus

Alles im Griff ... mit Sicherheit



Ecotainer® und Ecotainer® plus für großvolumige Spüllösungen: sichere Handhabung, kein Verschütten beim Ausgießen.
Ecotainer® und Ecotainer® plus bestehen aus unzerbrechlichen, umweltfreundlichem Polycarbonat. Sie wurden so konstruiert, dass ein Verschütten des Inhalts unabhängig vom Ausgusswinkel nicht möglich ist. So können auch großvolumige Spüllösungen exakt dosiert werden.
Die farbigen Mittel- und großen Behälter sind für die weiche Verengung in einer sicheren Gummistopfen für die Originalgröße der Spüllösung.
Die spezielle Konstruktion des Ecotainer® plus, das bei Ausgießen der Spüllösung kein Tropfen daneben geht – auch bei vollständigem Behälter und richtigem Ansetzen. Zudem ist es für die Messung für eine exakte Dosierung je nach Indikation.

Durch die Griff-Linie liegt der Behälter immer fest in der Hand. Besondere Sicherheit bieten Ecotainer® und Ecotainer® plus aufgrund der verschiedenen farbigen Verschlusskappen, die eine schnelle und sichere Zuordnung der unterschiedlichen Spüllösungen ermöglichen:

- Ringel für Ecotainer®
- Nahtlos für Ecotainer® plus
- Aqua 2/Paarm



Ecotainer® plus mit sterilem Gummistopfen

Ecotainer® plus verfügt zusätzlich über einen Einsteckstift, die Ansteckstelle ist mit einer abziehbaren Aluminiumschale steril verschlossen. In Kombination mit einer integrierten Halterung am Flaschenboden ermöglicht dies das praktische Arbeiten mit einem Überleitgerät mit Einsteckstift.
Zur Gewährleistung eines sterilen Einsatzes empfehlen wir, die Halterungsaugen des Ecobag® plus zu öffnen.

